



HU-FRIEDY KEY OPINION LEADER

ДОКТОР ДОМЕНИКО МАССИРОНИ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НАБОР МАССИРОНИ ОТ HU-FRIEDY

Доктор Доменико Массирони родился в Меленьяно, Италия. С отличием закончил медицинский факультет Университета г. Павии, там же получил специализацию по стоматологии. Являясь ортопедом, доктор Массирони с 1988 года использует микроскоп во время ортопедического лечения. Активный член EAED (Европейская Академия Эстетической Стоматологии) и AARD (Американская Академия Реставрационной Стоматологии). Автор нескольких публикаций по ортопедии и прецизионным реставрациям. Вместе со своим коллегой доктором Карло Гецци является основателем учебного центра MEG (Master Educational Group)




Посетите сайт: www.meg-educational.com*



“Растущие требования пациентов к эстетике побуждают врачей расширять свой кругозор и осваивать новые техники и инструменты, которые предлагает современная стоматология. Ведь целью эстетического протезирования является повышение качества жизни пациентов. Мой новый ортопедический набор и два эмалевых ножа, которые появились благодаря поддержке Hu-Friedy, помогут врачам достигать лучших клинических результатов.”

— ДОКТОР ДОМЕНИКО МАССИРОНИ

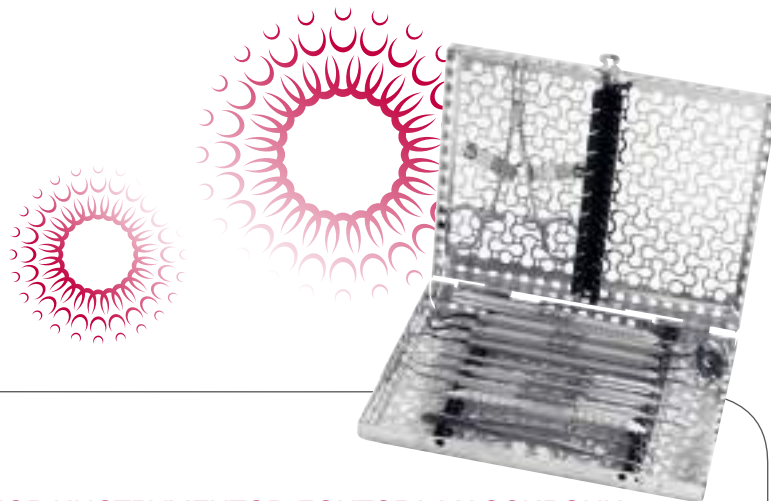

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДОКТОРА МАССИРОНИ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОД УВЕЛИЧЕНИЕМ

Новый набор инструментов доктора Массирони от Hu-Friedy предназначен для использования во время ортопедического лечения при процедурах протезирования. Доктор Массирони — пионер использования микроскопа в протезировании. Всю жизнь он стремился сделать свой набор инструментов, который позволит врачам работать под увеличением максимально точно и аккуратно.

В набор Массирони входят два закругленных эмалевых ножа, изготовленных с использованием технологии XTS (нанесения покрытия чёрного цвета из алюминий-титан-нитрида), и разработанных лично доктором Массирони в сотрудничестве с Hu-Friedy. Эти ножи являются самыми используемыми инструментами на финишных этапах реставрации. Специальный «безугловой» дизайн позволяет получить доступ к реставрации с любой стороны.

TNMASS1: эмалевый нож 1,2 мм. Тонкая рабочая часть прекрасно подходит для минимально инвазивных техник препарирования.



TNMASS2: эмалевый нож 1,5 мм. Имеет более широкую рабочую часть, чем у TNMASS1, что позволяет достичь оптимального результата при завершении традиционного протезирования.



Посетите наш сайт www.hu-friedy.ru

©2019 Hu-Friedy Mfg. Co. LLC. Все права защищены.

*MEG не является собственностью и не аффилирована с Hu-Friedy

Com-Dental

ГК «Ком-Денталь», 123104, г. Москва, Большой
Козийский пер. д.7с2, оф.31, тлф.: +7 (495) 580 30 80

Hu-Friedy



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НАБОР МАССИРОНИ?

TNMASS1 И TNMASS2



ЗАКРУГЛЕННЫЕ ЭМАЛЕВЫЕ НОЖИ МАССИРОНИ 1,2 ММ И 1,5 ММ

Эти два ножа являются наиболее часто используемыми на финишных стадиях ортопедического лечения. Специальный «безугловой» дизайн позволяет получить доступ к реставрации под любым углом.

PCORTLINI



ОДНОКОНЕЧНЫЙ ЗОНД КОРТЕЛЛИНИ, .5-15

Односторонний зонд Cortellini с лазерной маркировкой от 1 до 15 мм через 1 мм. Идеален для определения толщины коронки или винира.



GCPYD1



ПАКЕР ДЛЯ РЕТРАКЦИОННОЙ НИТИ YARDLEY № 1 С РУЧКОЙ № 41

Пакер Yardley для ретракционной нити. Подходит для укладки ретракционной нити в области моляров.



GCPBN1



ПАКЕР ДЛЯ РЕТРАКЦИОННОЙ НИТИ #BN1 С РУЧКОЙ № 41

Пакер BN1 для ретракционной нити. Подходит для укладки ретракционной нити малого и среднего диаметра в области фронтальных зубов.



CVIPCKOT4



ДУХУСТОРОННИЙ ИНТЕРПРОКСИМАЛЬНЫЙ КАРВЕР KOTSCHY

Ультратонкий интерпроксимальный карвер Kotschy с покрытием АТІN. Подходит для укладки тонких гладких нитей.



ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НАБОР МАССИРОНИ ОТ HU-FRIEDY

HU-FRIEDY
PROGRAMS



EXD16

**ДВУСТОРОННИЙ
ЗОНД-ЭКСПЛОРЕР
№ 1, РУЧКА SATIN
STEEL № 6** Точная
оценка краевого
прилегания и анализ
структур материалов,
используемых в
протезировании.



TP32

**ПИНЦЕТ
SEMKIN-TAYLOR,
ИЗОГНУТЫЙ**
Маленький и
универсальный,
отлично подходит
для работы под
увеличением.



H3

**ЗАЖИМ HALSTED-
MOSQUITO 12 CM,
ИЗОГНУТЫЙ.**
Идеален для
удаления временных
коронки как во
фронте, так и задних
групп зубов.



MIR5HD

**ЗЕРКАЛО № 5 С
ПОКРЫТИЕМ HD,
24 мм**

Одностороннее
зеркало высокого
разрешения
идеально для работы
под увеличением с
ксеноновым или LED
светом.

MH6

**РУЧКА ДЛЯ
ЗЕРКАЛА SATIN
STEEL № 6**

Используется
вместе с
зеркалами Hu-
Friedy № 4 и № 5.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НАБОР МАССИРОНИ:

Артикул Описание

MASSKITDIN НАБОР МАССИРОНИ ДЛЯ ОРТОПЕДИИ

Артикул Инструменты из набора Массирони:

EXD16 Двусторонний эксплорер № 1, ручка Satin Steel № 6

PCORTLINI Односторонний зонд Cortellini, .5-15

CVIPCKOT4 Карвер Kotschy интерпроксимальный двусторонний № 4

TNMASS1 Закругленный эмалевый нож Massironi, 1,2 мм

TNMASS2 Закругленный эмалевый нож Massironi, 1,5 мм

GCPYD1 Пакер для ретракционной нити Yardley № 1, ручка № 41

GCPBN1 Пакер для ретракционной нити BN1 ручка № 41


TP32 Пинцет Semkin-Taylor изогнутый № 32

H3 Зажим Halsted-Mosquito, 12см, изогнутый № 3

MH6 Ручка для зеркала Satin Steel #6, европейская резьба

MIR5HD Зеркало с покрытием HD № 5, одностороннее, 24 мм

IME12DIN17 Кассета IMS Infinity 1/2 DIN для 10 инструментов, черная

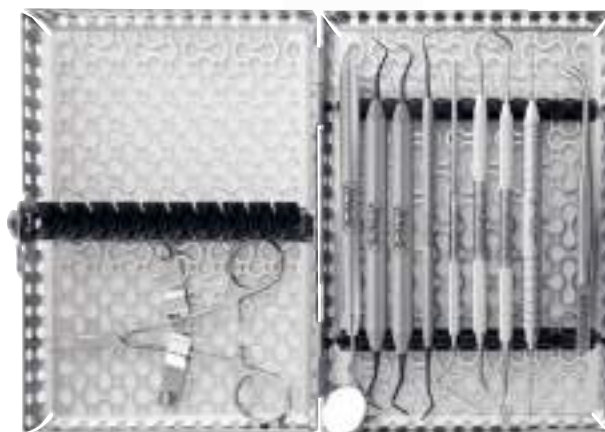

ТЕХНОЛОГИЯ XTS:

Темное покрытие из алюминий-титан-нитрида (AlTiN) обеспечивает гладкую, твердую поверхность инструмента и острый режущий край. Также покрытие XTS улучшает видимость инструмента благодаря высокой контрастности и уменьшению бликов от операционного светильника и микроскопа.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НАБОР МАССИРОНИ ОТ HU-FRIEDY

HU-FRIEDY
PROGRAMS



MASTER EDUCATIONAL GROUP (MEG) МЕЛЕНЬЯНО, ИТАЛИЯ

Master Educational Group (MEG) - это образовательный центр с упором на эстетическую стоматологию. В центре практикуют серьёзный подход к клиническому обучению. Большинство курсов и живых операций в этом центре проводятся доктором Доменико Массирони и его другом и коллегой доктором Карло Гецци. Во время курсов доктор Массирони на практике демонстрирует участникам свои идеи минимально инвазивной стоматологии, которые заключаются в максимальном сохранении целостности тканей для достижения гармоничных результатов. Протезирование состоит из множества шагов, цель которых — осуществление оптимальной анатомическо-функциональной и эстетической интеграции ортопедической конструкции во рту у пациента.



СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОТА ИНСТРУМЕНТОВ В КЛИНИКЕ IMS: ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАССЕТЫ?

Стандартизируя оборот инструментов при помощи системы IMS, вы продлеваете срок службы своих инструментов.

Стоматологи заявляют, что система IMS позволяет им экономить от 5 до 10 минут на каждой процедуре, что даёт возможность персоналу тратить это время более эффективно.

Также безопасная транспортировка загрязнённых инструментов уменьшает риск травмы и заражения инфекциями, передающимися через кровь.



Производитель: Hu-Friedy Mfg. Co., LLC | 3232 N.
Rockwell Street | Chicago, IL 60618 | USA
Эксклюзивный дистрибьютор в России: Com-Dental

Тлф.: +7 (495) 580 30 80

Email: hf@comdenal.ru | Сайт: www.Hu-Friedy.ru

©2019 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Все права защищены. HFL-187RU/0119

Com-Dental

ГК «Ком-Денталь», 123104, г. Москва, Большой
Козихинский пер. д.7с2, оф.31, тлф.: +7 (495) 580 30 80

Hu-Friedy