



HU-FRIEDY KEY OPINION LEADER

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
ВАСИЛИАДИСОМ РОМАНОМ



Василиадис Роман.

Стоматолог-терапевт.
Спикер стоматологических
конференций. Главный врач
стоматологической клиники
Denta-Vias (Саратов).

Набор инструментов для реставраций



DP18 – Пинцет диагностический



EXTU17/237 – Двухсторонний остроконечный зонд-эксплорер. Рабочая часть зонда сделана из особого сплава Duraspond, который обеспечивает остроту, гибкость и прочность кончика инструмента



MIR4SDSHD – Зеркало 22 мм двухстороннее с покрытием HD

MH6 – Ручка для зеркала



TNCIGFTMI1 – Мини-версия маленького универсального скругленного штопфера и узкой гладилки для пломбирования фиссур мелких и туннельных полостей.



TNCVICP – Очень тонкие и гибкие угловая и дистальная гладилки для работы в интерпроксимальных областях (II, III, IV и V классы)




TNCIGFT3 – Двусторонняя угловая и дистальная гладилки для внесения материалов и формирования поверхностей III и IV классов реставраций. Может использоваться в качестве пакера ретракционной нити.



TNPFI8A – Комбинация универсальной узкой и тонкой угловой и дистальной гладилки.



PFIDD1/2 – Двухсторонний инструмент для фиссур в виде комбинации конусообразного штопфера с заостренным кончиком и остроконечного зонда.

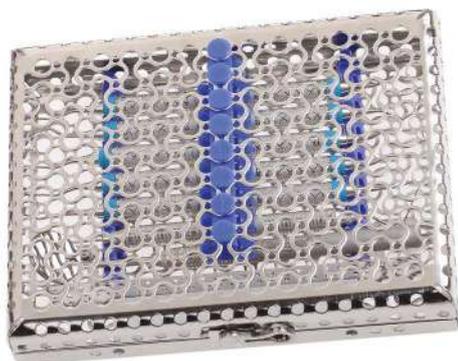

IME12DIN1_ – Кассета на 10 инструментов

 **Com-Dental**

Эксклюзивный дистрибьютор в России –
ГК Com-Dental. Москва, Большой Козихинский
пер.7с2, оф.31 тлф: 8 (495) 580-30-80

Hu-Friedy

XTS ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ СЕРИИ XTS

- Рабочая часть инструмента изготовлена из гибкой стали тройной закалки (Immunity Steel®) с алюминий-титан-нитридным (AlTiN) покрытием
- Покрытие AlTiN:
 - создает твердую, гладкую, устойчивую к царапинам поверхность;
 - значительно уменьшает прилипание материала к рабочей части;
 - уникальный черный цвет покрытия не оседает бликов и не меняет цветовосприятие реставрации;
 - контраст между черным цветом покрытия, композитом и тканью зуба позволяет легко контролировать объем материала.

Независимые исследования подтвердили выдающиеся свойства покрытия алюминий-титан-нитрид (AlTiN) по сравнению с традиционными покрытиями золотых оттенков на основе титана:

Условный показатель скольжения стального шара по поверхности



Измерения производились между стальным шаром и образцом с покрытой поверхностью

Твердость (устойчивость к нагрузкам)



Твердость по Виккерсу

“ Часто меня спрашивают, какими инструментами я работаю. Одни из любимых инструментов в терапии, хирургии и ортопедии - это инструменты Hu-Friedy. Они легкие, удобные, отработана каждая деталь инструмента. В реставрационной стоматологии пользуюсь инструментами серии XTS - гладилками с тонкими рабочими частями, зондами и фиссурными штопферами для создания фиссур жевательных зубов. Большой плюс этих инструментов в том, что к поверхности не прилипают композиты. Ну и, конечно, можно сделать много интересного этими изумительными инструментами. ”

—Д-р Василадис Р.,
главный врач Центра эстетической
стоматологии и реконструктивной
хирургии «ДЕНТА-ВИАС», г. Саратов



- Большой диаметр (9,5 мм) и легкость ручки обеспечивают работу с инструментом без напряжения кисти
- Широкий конический переходник с насечками от ручки к рабочей части (Comfort Zone) улучшает тактильную чувствительность, облегчает выполнение манипуляций
- Гладкая поверхность ручки легко очищается и устойчива к коррозии
- Матовое антибликовое покрытие ручки (Satin Steel) – дополнительный комфорт при работе с инструментами серии XTS



Com-Dental

Эксклюзивный дистрибьютор в России –
ГК Com-Dental. Москва, Большой Козихинский
пер.7с2, оф.31 тлф: 8 (495) 580-30-80

